




# GIMA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**Termometro digitale a succhiotto**  
**Nipple-like digital pacifier thermometer**

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**

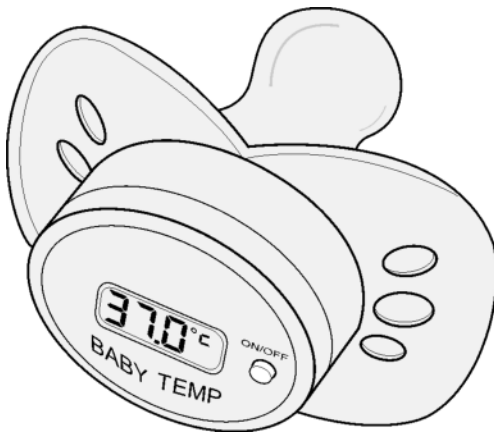

M25568-I-G-Rev.2.01.08

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.  
**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.



### Termometro digitale a succhiotto

La tettarella del termometro digitale è in silicagel atossico. La temperatura viene rilevata accuratamente tramite micro elettrodi. Tutti gli elementi del termometro sono progettati per l'utilizzo sui bambini. Il design curvilineo è studiato al fine di proteggere la pelle delicata dei bambini.

### Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione: 35.5°C - 42.0°C (display °C)      Precisione: +/- 0.1°C (display °C)  
96.0°F - 107.6°F (display °F)      +/- 0.2°F (display °F)

Batteria: batteria bottone da 1.5 V (LR/SR-41) - vita media circa 100 ore di utilizzo continuo.

Dimensioni: 70 x 60 x 60 mm (con il contenitore). Peso: circa 13 g.

Allarme: suono di circa 5 secondi dopo la rilevazione della temperatura.

Tempo di misurazione: circa 2 minuti ca. Consumo: 0.15 mW in fase operativa.

### Istruzioni per l'uso

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, disinfettare la tettarella con un disinfettante adeguato.
2. Premere il tasto on/off: l'apparecchio emette un suono e il display si accende.
3. A questo punto, il termometro mostra l'ultima temperatura in memoria per circa 2 secondi, e quindi appare a display o L°C o L°F con °C o °F lampeggiante, questo significa che il termometro è pronto per l'uso. (Se la temperatura della stanza supera i 32°C il termometro mostra la temperatura della stessa invece di L°C o L°F).
4. Inserire la tettarella nella bocca del bambino per effettuare la misurazione: il valore della temperatura che appare a schermo aumenta gradualmente mentre °C o °F continua a lampeggiare.
5. Il processo di misurazione normalmente dura circa 2 minuti. Una volta effettuata la misurazione, °C o °F smette di lampeggiare e il segnale di allarme suona per circa 5 secondi. A questo punto il termometro mostra la temperatura corporea del bambino.
6. Il termometro si spegne automaticamente 10 minuti dopo l'ultima misurazione. Comunque, al fine di risparmiare l'energia della batteria si raccomanda di spegnerlo manualmente.



### Avvertenze

1. *Non piegare o far cadere il termometro.*
2. *Non immergere il termometro in liquidi, il prodotto non è impermeabile.*
3. *Disinfettare la tettarella con un disinfettante adeguato, non farla bollire.*
4. *Non mettere il termometro a contatto con agenti chimici o diluenti.*
5. *Evitare di esporre il termometro alla luce diretta del sole.*
6. *Non disassemblare il termometro eccetto che per la sostituzione della batteria.*
7. *Il termometro è già stato calibrato durante la fabbricazione. Se viene utilizzato secondo le istruzioni per l'uso non ha necessità di essere nuovamente calibrato. Nel caso in cui sorgano dubbi sulla precisione della misurazione contattate il produttore.*

### Sostituzione della batteria

1. La batteria deve essere sostituita quando a display appare il simbolo "■".
2. Aprire il coperchio dell'alloggiamento batteria ed estrarre la vecchia batteria con uno stuzzicadenti.
3. Inserire una nuova batteria bottone da 1.5 V (LR/SR-41).
4. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento della batteria.

Note: Posizionare il polo positivo "+" della batteria verso l'alto e quello negativo "-" verso il basso. Se non si utilizza il termometro per un lungo periodo, estrarre la batteria.



**Attenzione:** *Non inghiottire la batteria. E' pericoloso per la vostra vita. Mantenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Nel caso in cui qualcuno inghiottisse la batteria, rivolgersi subito al più vicino pronto soccorso.*

